

München, 16. Dezember 2020

WICHTIGE INFORMATION

Betrifft alle **MMI- und IFAP-Anwender**, die noch **nicht** auf das **neue Verordnungsmodul** umgestellt haben.

Wie wir bereits mitgeteilt haben, wird die Rezeptverordnung mit Ifap und MMI ab dem 1.1.2021 nicht mehr zur Verfügung stehen.

Bitte beachten Sie, dass Sie ab 1.1.2021 nur noch über das neue Verordnungsmodul Rezepte ausstellen können.

Eine Umstellung ist daher zwingend noch in diesem Jahr erforderlich.


Anleitung zur Umstellung auf das neue Verordnungsmodul

Planen Sie für die Umstellung inklusive Druckeranpassungen mindestens 1-2 Stunden ein, je nach Datenmenge kann die angegebene Zeit variieren. Während dieser Zeit kann in easymed nicht gearbeitet werden.


1. Für die Umstellung benötigen Sie das mindestens das Service Pack 20.4-30771 vom 19.11.2020. Über Hilfe/Info kann dies überprüft werden.

Version: ServicePack 20.4-30771


2. Erstellen Sie eine aktuelle Datensicherung!
3. Um die Umstellung zu starten, muss easymed an allen Nebenstationen geschlossen sein. Öffnen Sie easymed am Server/Hauptrechner und starten die Systemüberprüfung. Hierzu klicken Sie auf <Dienste>Systemüberprüfung>VOM-System Requirements prüfen> durchführen.

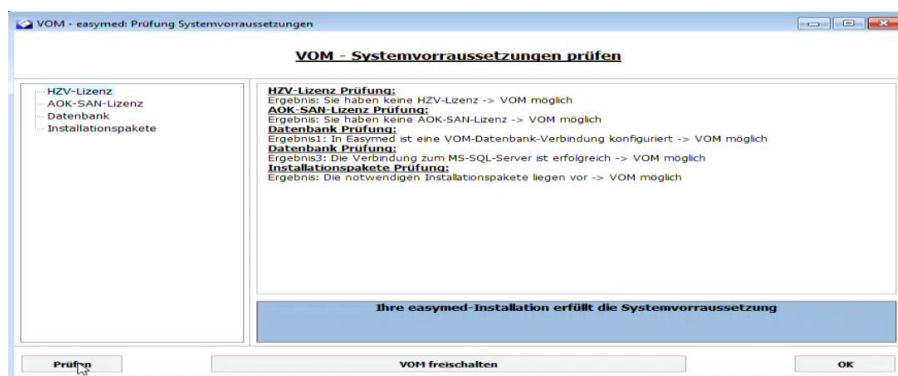


- Bitte planen Sie für die Aktivierung etwas mehr Zeit ein. Beachten Sie, dass während des Vorgangs in easymed **nicht** gearbeitet werden kann.
- Mit Klick auf „VOM freischalten“ und bestätigen des folgenden Hinweises startet die Umstellung.

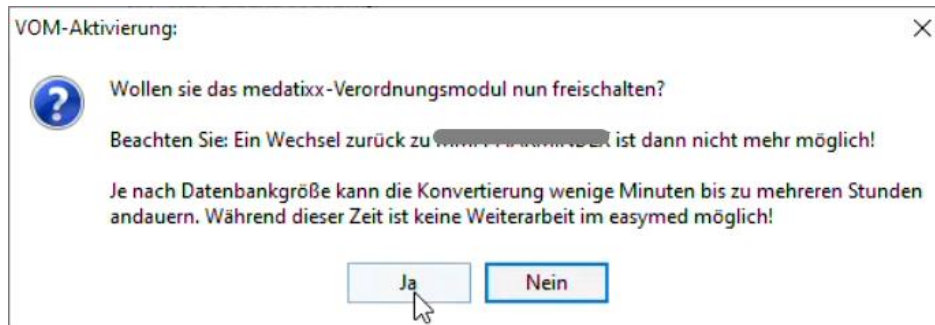


- Brechen Sie die Konvertierung nicht ab, selbst wenn das Fenster „keine Rückmeldung“ zeigt, je nach Datenmenge und Rechnerleistung kann es zwischen 10 Minuten bis 1 Stunde oder länger variieren.

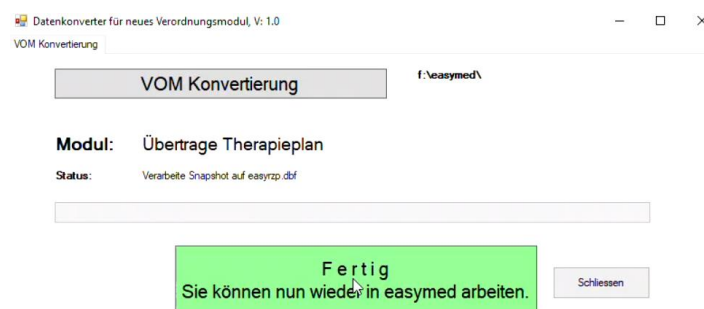

- Nach erfolgreichem Abschluss können Sie das Fenster schließen.
- Bitte starten Sie an allen Stationen easymed; falls folgende Meldung erscheint, so stimmen Sie der Bedingung des Lizenzvertrages zu und gehen auf die Schaltfläche „Installieren“.

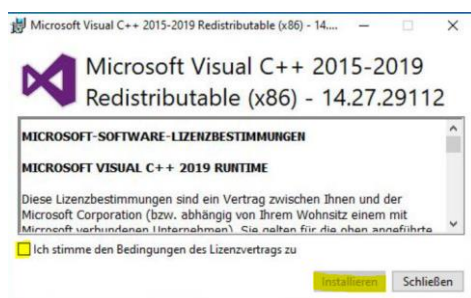

Danach wird die VOM Installation einmalig durchgeführt, dies dauert nur eine kurze Zeit.

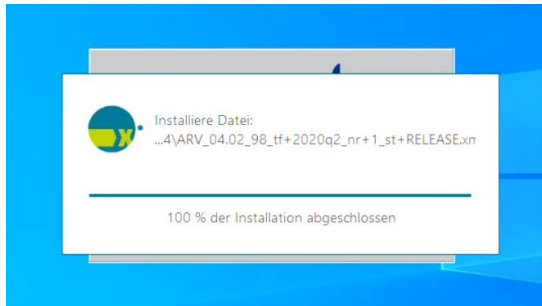

Wichtiger Hinweis: Bitte überprüfen Sie nach der Umstellung die **Rezeptausdrucke**. Sollten die Ausdrucke verschoben oder leer sein, können Sie diese wie folgt korrigieren:

System-Einstellungen- Passwort „system“-Formulare-Rezept- z.B. Kassenrezept, Privatrezept etc.



Offset X-Achse/Abstand nach links: Verschiebt den Formularinhalt nach rechts und links. Die Erhöhung des Wertes um 1 bedeutet, dass der Formularinhalt um 1mm nach rechts gedruckt wird.


Offset Y-Achse/ Abstand nach oben: Verschiebt den Formularinhalt nach unten und oben. Die Erhöhung des Wertes um 1 bedeutet, dass der Formularinhalt 1 mm weiter unten gedruckt wird.

Sollte der Wert 0 nicht ausreichen können Sie z.B. auch Negativwerte z.B. -2 eingeben um den Ausdruck weiter nach links oder nach oben zu verschieben.

Hinweis für Anwender, welche das **Privatrezept im Hochkant-Format** verwenden!

Für die Einrichtung gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie über den Rezeptbutton das Verordnungsmodul.
2. Klicken Sie rechts unten auf die Schaltfläche „Einstellungen“.
3. Wählen Sie im Bereich Privatrezeptdruck die Option „individuelles Privatrezept“.
4. Klicken Sie auf das Symbol „Layout anpassen“.

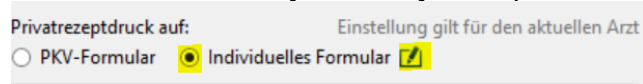

5. Wählen Sie die Option „Hochformat“.


Format der DIN-A6-Seite: Hochformat

6. Positionieren Sie nun die Elemente des Formulars wie gewünscht, indem Sie diese mit gedrückter linker Maustaste verschieben. Für das Element „Medikamenteneinträge“ vergeben Sie bei Bedarf Platz für mehr oder weniger Präparate, indem Sie darauf klicken und im sich öffnenden Fenster im Bereich „Präparate“ auf „Hinzufügen“ bzw. „Entfernen“ klicken.
7. Speichern Sie das individuelle Privatrezept mit Klick auf „OK“ ab.
8. Bitte führen Sie die oben genannten Schritte für jeden aktiven Arzt einmal durch.

Bitte überprüfen Sie nach der Umstellung den Ausdruck. Sollte dieser verschoben schein, können Sie die Einstellungen wie folgt anpassen:

System-Einstellungen- Passwort „system“-Formulare-Rezept → Privatrezept und passen die x und y Achsen, wie oben beschrieben an.

E-Learnings zum Verordnungsmodul stehen Ihnen unter folgende Menüpunkte zur Verfügung.

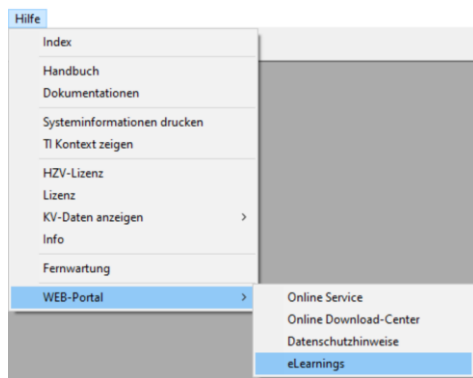

Über folgenden Link gelangen Sie ebenfalls zu den E-Learnings:
<https://akademie.medatixx.de/elearning.html?kategorie=easymed>

Bei Fragen steht Ihnen unser zentraler Software-Support gerne zur Verfügung unter **089 149709-5490** oder Sie wenden Sich an Ihren **zuständigen medatixx-Servicepartner!**

Mit freundlichen Grüßen

Ihr medatixx-Team